



ACTIVE SYSTEM

QUICK START GUIDE

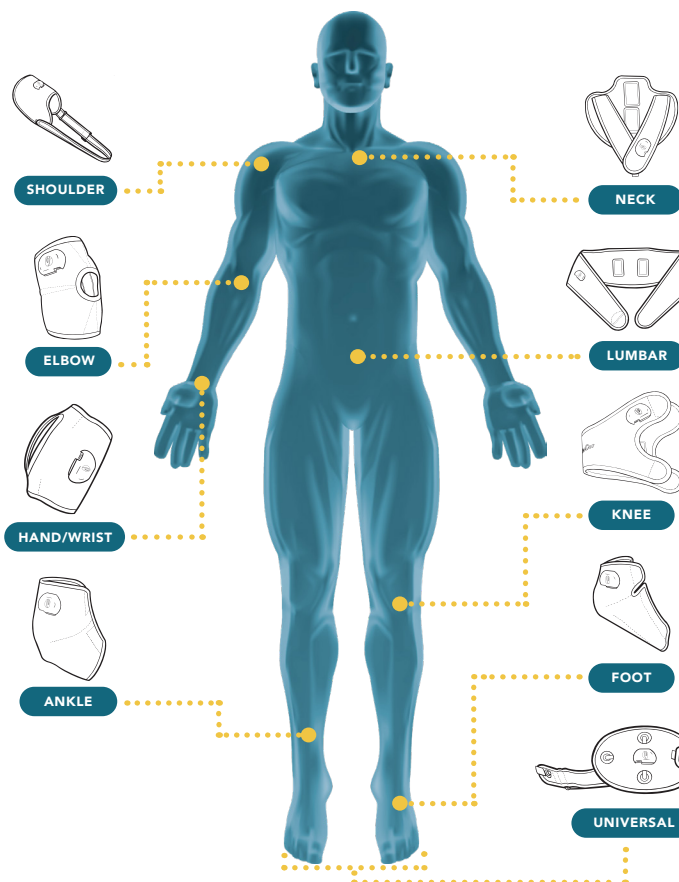

QUICK START GUIDE

PACKAGE COMPONENTS AND ACCESSORIES

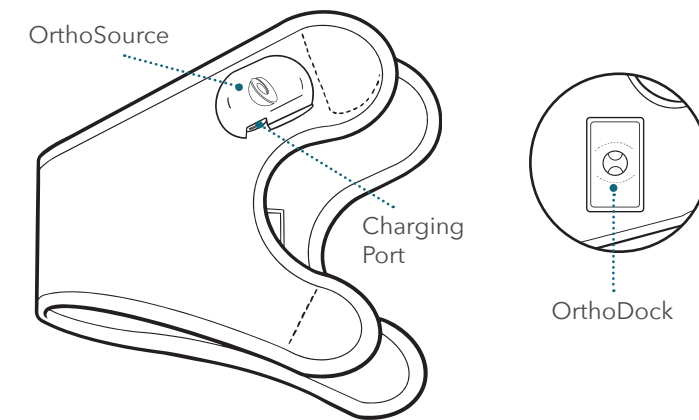

DEFINITIONS:

OrthoSource: Module containing electronics necessary to deliver Pulsed Electromagnetic Field (PEMF) technology

OrthoDock: Location where OrthoPods are inserted on the Active System


Active System: Multiple-use device designed to house both the OrthoSource and OrthoPods when in use and direct therapy to the appropriate areas of the body.

AC Adapter/Charger: Micro-USB compatible AC charger used to charge the OrthoSource. 3.7 V DC internally powered.

These therapy accessories are provided separately:

OrthoPods: Single-use therapy pods

PRIOR TO USE: CHARGING

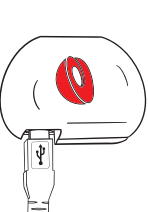

- Make sure to fully charge your device prior to the first time you use it.
1. Plug the power cord into the micro-USB port on the bottom of the OrthoSource. A red light will indicate the device is charging.
 2. When the device is fully charged, the red light will turn off. The device takes 90 minutes to charge.


QUICK START GUIDE

STEP 1: PREPARE PODS

1. Open a new package of OrthoPods 5-10 minutes before you start a therapy session to allow them to warm up.
2. Follow the operating instructions included with the OrthoPods.



STEP 2: INITIATE THERAPY

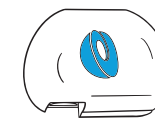


1. Insert the OrthoPods into the OrthoDocks on the OrthoCor Active System. The magnetic fasteners should ensure a strong connection.
2. A blue light will appear on the OrthoSource, indicating that the therapy session has begun.
3. Therapy will run for 2 hours.

STEP 3: POSITIONING

Find your device and follow the instructions. Adjust to fit comfortably but do not overtighten.


SHOULDER

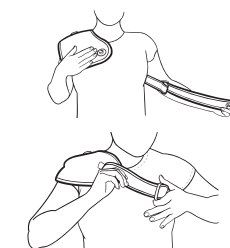

1. Determine which shoulder needs to be treated. The strap first should be secured to the magnetic closure on the back of the shoulder - this should be the closure farthest away.
2. Place the device on the shoulder, grab the strap from behind the body and pull the strap across the chest to the magnetic closure on the front of the device. Adjust the strap using the buckle until it's comfortable and holds the device in place on the shoulder.
3. To remove the device, pull on the release tab on the front side of the device and pull up away from the shoulder until the magnetic closure releases.


QUICK START GUIDE

ANKLE

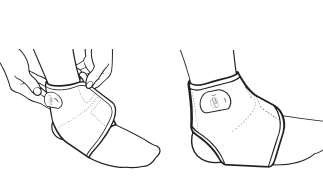


1. Place the heel of your foot into the hole located in the center of the ankle device, ensuring the OrthoSource is above the ankle.
2. Wrap the device around the front of the ankle. The OrthoPods should be on each side of the ankle. Adjust the device to fit comfortably, but do not overtighten.

BACK

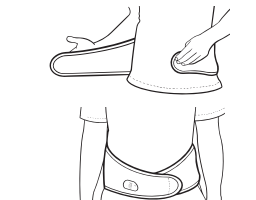

1. Position the back device around the waist, use the tabs at the end of the straps to help position the device. The OrthoPods should be positioned directly over the intended treatment area.
2. Fasten the device comfortably around the front of the body. Adjust to fit, but do not overtighten.

ELBOW

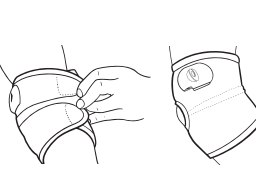

1. Position the elbow device by placing the elbow joint in the hole in the center of the device. The OrthoSource should be positioned just above the elbow.
2. The OrthoPods should be positioned on each side of the elbow joint. Adjust the device to fit comfortably, but do not overtighten.


KNEE



1. Position the knee system with the logo centered on the back of the knee. Wrap the tabs around to the front of the knee.
2. The OrthoSource should be positioned just above the knee. OrthoPods should be positioned on each side of the knee joint.
3. Fasten the tabs comfortably above and below the knee. Adjust to fit but do not overtighten.


QUICK START GUIDE

FOOT

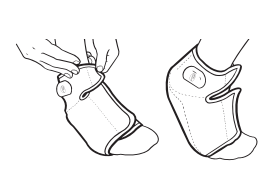


1. Place the heel of your foot into the hole located in the center of the foot device ensuring the OrthoSource is above your ankle. Wrap the device around the foot.
2. Fasten the device on the front of the foot. Adjust to fit, but don't overtighten. The OrthoPods should be positioned directly below the foot.
3. While wearing the device do not put weight or walk on the OrthoPods.

NECK

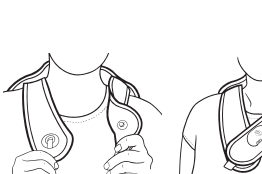

1. Position the neck device with the OrthoPods against the back of neck. Grab the two front straps and pull forward and bring together until the magnetic closure automatically snaps closed. Make sure the OrthoPods are in contact with the treatment area after closure.
2. To remove the device, pull on the release tab on the top strap until the magnetic closure releases and then remove the device.


UNIVERSAL

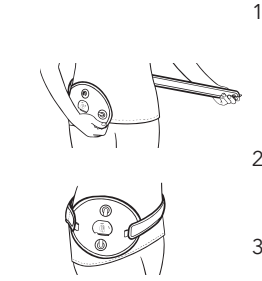

1. Place the end of the strap onto one of the fasteners near the OrthoSource until the magnetic fastener engages. Place the device over the treatment area. Wrap the strap around the treatment area and adjust the strap length for comfort.
2. Secure the end of the strap to the magnetic fastener on the opposite side of the device. All four fasteners may be used interchangeably to secure the device.
3. To remove the device, pull on the release tab on the top strap until the magnetic closure releases and then remove the device.


QUICK START GUIDE

WRIST

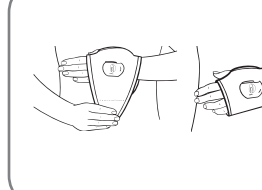

1. Place thumb through the thumb slot, ensuring the OrthoSource is sitting on top of the hand or wrist. Wrap the end of the wrist/hand device around the hand or wrist and fasten.
2. Slide the device up or down the hand or wrist to ensure it is covering the desired treatment site.


STEP 4: ENDING THERAPY

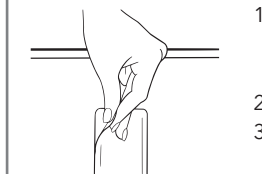

1. After 2 hours, the blue indicator light on the OrthoSource will flash for 2 minutes before turning off – indicating the end of the therapy.
2. Remove the Active System from the body.
3. Firmly grasp each OrthoPod and pull it away from the device until the connection with the OrthoDock is released. Dispose of the used OrthoPods in the trash.

RECHARGING INFORMATION

- A freshly charged Active System should have sufficient power for two full therapies before needing to recharge.
- Leaving a fully charged device connected to the charger will not harm the battery; the device may be left charging until the beginning of the next therapy.

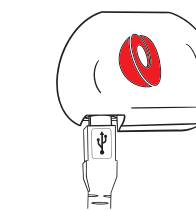

To learn more about setting up and using your device, visit us at: www.orthocormedical.com.

QUICK START GUIDE

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

How do I know when my device is charged?

When your device is fully charged, the red light will turn off.

What if the red light does not come on when I'm charging the device?

The red light will only turn on while the battery is charging. Make sure there is power to the outlet you are using, and the micro-USB charger is fully inserted into the OrthoSource charging port. If the red light still will not turn on, please contact OrthoCor Medical.

What if the blue light does not turn on when I insert new OrthoPods?

Make sure the OrthoCor device is fully charged, and the OrthoPods are properly seated in the OrthoDock. The blue light should appear to indicate the therapy session has begun. If the issue persists, please contact OrthoCor Medical.

How do I know that the therapy is completed?

After 2 hours, the blue indicator light on the OrthoSource will flash for 2 minutes indicating the end of the therapy. The light will completely turn off after 2 minutes.

What is the warranty policy?


OrthoCor Medical has a six-month manufacturer's warranty on any defects. OrthoCor Medical does not accept returns or offer refunds, except for cases that fall within the six-month warranty policy.

LED INDICATION

Battery Status	LED Indication
Charging	Red
Active Therapy	Blue
Therapy Ending	Flashing Blue


SISTEMA ACTIVO

INSTRUCCIONES DE USO

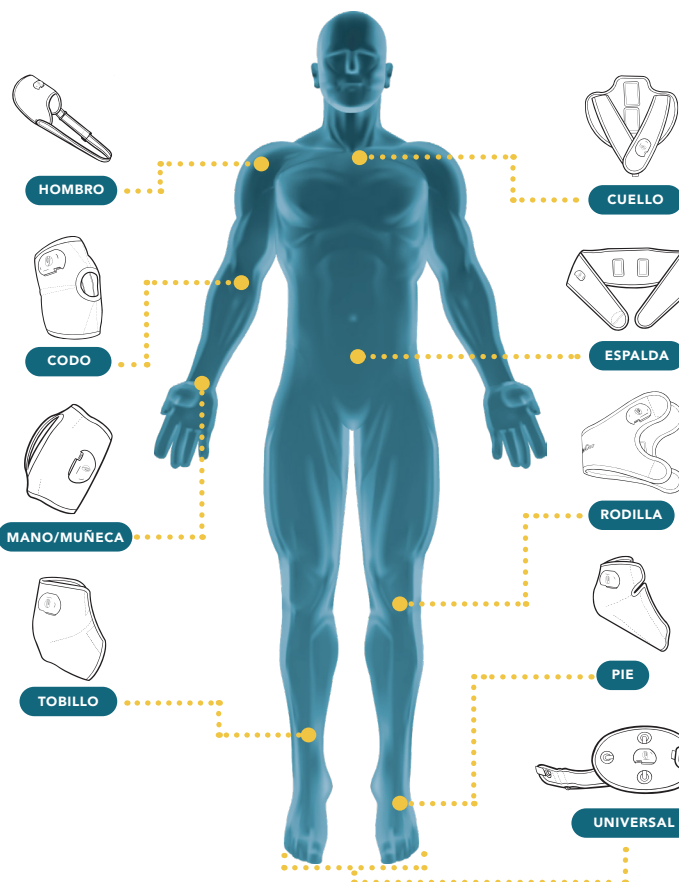

INSTRUCCIONES DE USO

COMPONENTES Y ACCESORIOS DEL PAQUETE

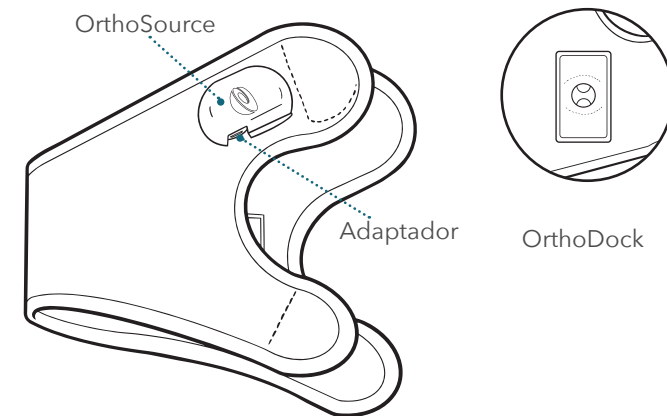

DEFINICIONES:

OrthoSource: Módulo que contiene la electrónica necesaria para suministrar la tecnología de campo electromagnético pulsado (PEMF)
OrthoDocks: Lugar de inserción de los OrthoPods en el Sistema Activo
Sistema activo: Dispositivo de uso múltiple diseñado para alojar tanto el OrthoSource como los OrthoPods durante su uso y dirigir la terapia a las áreas apropiadas del cuerpo
Adaptador/cargador de CA: Cargador de CA compatible con Micro-USB utilizado para cargar el OrthoSource. Alimentación interna de 3,7 V CC.

Estos accesorios terapéuticos se suministran por separado:

OrthoPods: Cápsulas terapéuticas de un solo uso

ANTES DE SU USO: CARGAR

1. Asegúrese de cargar completamente su dispositivo antes de utilizarlo.
2. Conecte el cable de alimentación al puerto micro-USB situado en la parte inferior del OrthoSource. Una luz roja indicará que el dispositivo se está cargando.
3. Cuando el dispositivo esté completamente cargado, la luz roja se apagará. El dispositivo tarda unos 90 minutos en cargarse por completo.


INSTRUCCIONES DE USO

PASO 1: PREPARE LAS CÁPSULAS

1. Abra un paquete nuevo de OrthoPods de 5 a 10 minutos antes de empezar una sesión de terapia para permitir que se calienten.
2. Siga las instrucciones de uso incluidas con los OrthoPods.



PASO 2: INICIAR LA TERAPIA

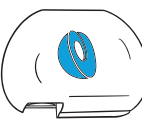


1. Introduzca los OrthoPods en los OrthoDocks del Sistema Activo Rodilla OrthoCor. Los cierres magnéticos deben asegurar una conexión fuerte.
2. Se encenderá una luz azul en el OrthoSource, indicando que la sesión de terapia ha comenzado.
3. La terapia durará 2 horas

PASO 3: POSICIONAMIENTO

Encuentre su dispositivo y siga las instrucciones. Ajuste para que quede cómodo, pero no lo apriete demasiado.

HOMBRO

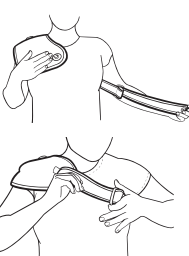

1. Determine qué hombro debe tratarse. La correa debe fijarse primero al cierre magnético de la parte posterior del hombro, éste debe ser el cierre más alejado.
2. Coloque el dispositivo en el hombro y agarre la correa por detrás del cuerpo y tire de ella a través del pecho hasta el cierre magnético de la parte delantera del dispositivo. Ajuste la correa mediante la hebilla hasta que le resulte cómoda y mantenga el dispositivo en su sitio sobre el hombro.
3. Para quitarse el dispositivo, tire de la lengüeta de liberación situada en la parte delantera del dispositivo y tire hacia arriba alejándolo del hombro hasta que el cierre magnético se libere y, a continuación, quítese el dispositivo.


INSTRUCCIONES DE USO

CUELLO




1. Coloque el dispositivo para el cuello con los OrthoPods contra la nuca. Agarre las dos correas delanteras y tire hacia delante y júntelas hasta que el cierre magnético se cierre automáticamente. Asegúrese de que los OrthoPods estén en contacto con la zona de tratamiento tras el cierre.
2. Para retirar el dispositivo, tire de la lengüeta de liberación de la correa superior hasta que el cierre magnético se libere y, a continuación, retire el dispositivo.

CODO

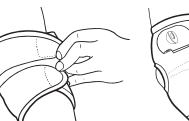


1. Coloque el dispositivo para el codo colocando la articulación del codo en el orificio del centro del dispositivo. El OrthoSource debe colocarse justo encima del codo.
2. Los OrthoPods deben colocarse a cada lado de la articulación del codo. Ajuste el dispositivo para que quede cómodo, pero no lo apriete demasiado.

ESPALDA

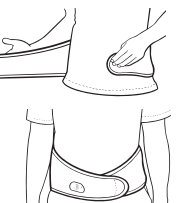

1. Coloque el dispositivo de espalda alrededor de la cintura, utilice las lengüetas situadas en el extremo de las correas para ayudar a colocar el dispositivo. Los OrthoPods deben colocarse directamente sobre la zona de tratamiento prevista.
2. Ajuste el dispositivo cómodamente alrededor de la parte delantera del cuerpo. Ajústelo a su medida, pero no lo apriete demasiado.


TOBILLO

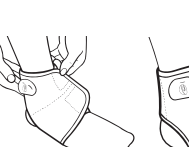

1. Coloque el talón del pie en el orificio situado en el centro del dispositivo para el tobillo asegurándose de que el OrthoSource quede por encima del tobillo.
2. Coloque el dispositivo alrededor de la parte delantera del tobillo. Los OrthoPods deben estar a cada lado del tobillo. Ajuste el dispositivo para que quede cómodo, pero no lo apriete demasiado.

INSTRUCCIONES DE USO

PIE

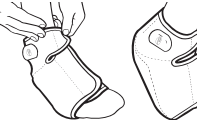


1. Coloque el talón del pie en el orificio situado en el centro del dispositivo para el pie asegurándose de que el OrthoSource quede por encima del tobillo. Envuelva el dispositivo alrededor del pie.
2. Ajuste el dispositivo en la parte delantera del pie. Ajústelo a su medida, pero no lo apriete demasiado. Los OrthoPods deben colocarse directamente debajo del pie.
3. Mientras lleve el dispositivo no ponga peso ni camine sobre los OrthoPods.

RODILLA



1. Coloque el sistema de rodilla con el logotipo centrado en la parte posterior de la rodilla. Enrolle las lengüetas hasta la parte delantera de la rodilla.
2. El OrthoSource debe colocarse justo encima de la rodilla. Los OrthoPods deben colocarse a cada lado de la articulación de la rodilla.
3. Ajuste las lengüetas cómodamente por encima y por debajo de la rodilla. Ajústelas a su medida pero no las apriete demasiado.

UNIVERSAL

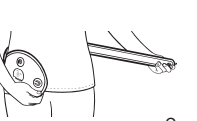

1. Coloque el extremo de la correa grande o pequeña en uno de los cierres cercanos al OrthoSource hasta que el cierre magnético encaje. Coloque el dispositivo sobre la zona de tratamiento. Envuelva la correa alrededor de la zona de tratamiento y ajuste la longitud de la correa para mayor comodidad.
2. Fije el extremo de la correa al cierre magnético del lado opuesto del dispositivo. Los cuatro cierres del dispositivo pueden utilizarse de forma intercambiable para fijar el dispositivo.
3. Para retirar el dispositivo, tire de la lengüeta de liberación de la correa superior hasta que se suelte el cierre magnético y, a continuación, retire el dispositivo.


INSTRUCCIONES DE USO

MANO/MUÑECA



1. Coloque el pulgar a través de la ranura para el pulgar, asegurándose de que el OrthoSource queda asentado sobre la mano o la muñeca. Enrolle el extremo del dispositivo para muñeca/mano alrededor de la mano o muñeca y abróchelo.
2. Deslice el dispositivo hacia arriba o hacia abajo por la mano o la muñeca para asegurarse de que cubre la zona de tratamiento deseada.


PASO 4: FINAL DE LA TERAPIA

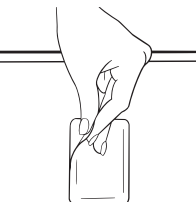

1. Después de 2 horas, la luz indicadora azul del OrthoSource parpadeará durante 2 minutos antes de apagarse, indicando el final de la terapia.
2. Retire el Sistema Activo de la zona de tratamiento.
3. Sujete firmemente cada OrthoPod y tire de él hasta soltar la conexión con el OrthoDock. Deseche los OrthoPods usados en la basura.

INFORMACIÓN DE RECARGA

- Un Sistema Activo recién cargado debería tener energía suficiente para dos terapias completas antes de necesitar recargarse.
- Dejar un aparato completamente cargado conectado al cargador no dañará la batería; el dispositivo puede dejarse cargando hasta el comienzo de la siguiente terapia.

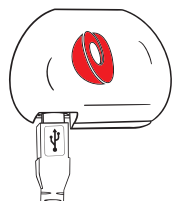

para obtener más información, visítenos en www.orthocormedical.com.

INSTRUCCIONES DE USO

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo sé cuándo está cargado mi dispositivo?

Cuando su dispositivo esté completamente cargado, se apagará la luz roja.

¿Qué ocurre si la luz roja no se enciende cuando estoy cargando el dispositivo?

La luz roja sólo se encenderá mientras la batería se esté cargando. Asegúrese de que hay corriente en la toma de corriente que está utilizando y de que el cargador micro-USB está completamente insertado en el puerto de carga de OrthoSource. Si la luz roja sigue sin encenderse, póngase en contacto con OrthoCor Medical.

¿Qué ocurre si la luz azul no se enciende cuando inserto nuevos OrthoPods?

Asegúrese de que el dispositivo OrthoCor está completamente cargado y de que los OrthoPods están correctamente colocados en el OrthoDock. La luz azul debería aparecer para indicar que la sesión de terapia ha comenzado. Si el problema persiste, póngase en contacto con OrthoCor Medical.

¿Cómo puedo comprobar que la terapia se ha completado?

Después de 2 horas, la luz indicadora azul del OrthoSource parpadeará durante 2 minutos indicando el final de la terapia. La luz se apagará completamente al cabo de 2 minutos.

¿En qué consiste la política de garantía?

OrthoCor Medical tiene una garantía del fabricante de seis meses sobre cualquier defecto. OrthoCor Medical no acepta devoluciones ni ofrece reembolsos, excepto en los casos que entren dentro de la política de garantía de seis meses.

LED INDICACIONES

Estado de la Batería	LED Indicación
Cargando	Luz roja
Terapia activa	Luz azul
Finalización de la terapia	Luz azul intermitente